

## BM-Check

# GUÍA DEL USUARIO


## 1 - Presentación del producto

El auricular de bucle magnético es un dispositivo compacto para que las personas sin audífonos puedan escuchar un sistema de bucle auditivo como si estuvieran usando un audífono en posición "T".

Se puede utilizar para:

- Comprobar la fuente de sonido de un bucle magnético
- Proporcionar un dispositivo de audio a una persona con problemas de audición sin audífono
- Proporcionar un dispositivo de audio a una persona con pérdida auditiva cuya prótesis no tiene posición en "T".

## 2 - Componentes

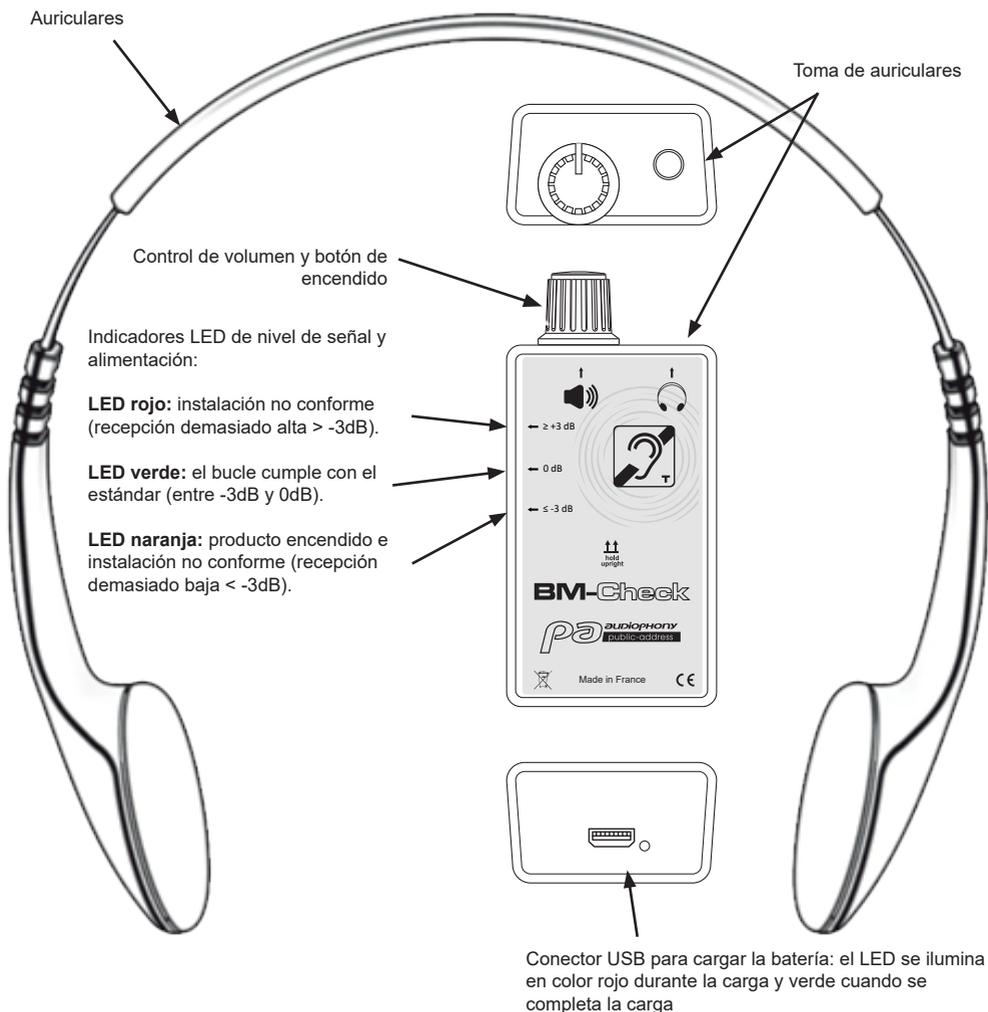

Nota: El BM-Check es un medidor de campo magnético y que cumple la norma EN60118-4.

### 3 - Funcionamiento

#### El probador de bucle auditivo funciona mediante batería interna.

1. Colóquese los auriculares en las orejas y ajústelos cómodamente para escuchar.
2. Sostenga el probador de bucle auditivo de forma vertical y a la altura de la cabeza para imitar la posición de un audífono.



3. Encienda la unidad girando el control de volumen ligeramente hacia la derecha hasta obtener un sonido adecuado para escuchar. Gire el botón a la izquierda para disminuir el volumen si es necesario.
4. Si el LED naranja no se ilumina, compruebe que la batería interna esté correctamente cargada.
5. Cuando termine de utilizar los auriculares, gire el botón de volumen hacia la izquierda hasta que el LED se apague.

#### Importante

Apague siempre la unidad cuando no esté en uso para prolongar su vida útil.

Sostenga en todo momento el comprobador de audición en bucle a la altura del oído y en posición vertical cuando escuche un sistema de bucle para garantizar un buen rendimiento.

## 4 - Mantenimiento

Para prolongar la vida útil del producto, realice las siguientes acciones con regularidad:

Limpie la unidad con un paño suave y seco, o con toallitas de limpieza adecuadas. No utilice disolventes de limpieza y evite que entren líquidos en el auricular de bucle auditivo.

Apague el auricular cuando no esté en uso.

Mantenga la batería cargada.

## 5 - Solución de problemas

Síntomas	Posible error	Acción
El LED naranja de encendido no se ilumina.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La batería está descargada</li> <li>2. Hay una fallo interno</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conecte el probador a un cargador USB</li> <li>2. Póngase en contacto con su distribuidor</li> </ol>
No se escucha ningún sonido de bucle en el auricular de bucle auditivo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sonido no es lo suficientemente alto.</li> <li>2. El probador no está a una distancia adecuada para escuchar el bucle.</li> <li>3. El bucle magnético no funciona.</li> <li>4. El auricular tiene un problema.</li> <li>5. Error interno.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suba el volumen.</li> <li>2. Acerque al auricular de bucle auditivo al bucle.</li> <li>3. Utilice otro probador de bucle auditivo o sistema de escucha (si es posible) para asegurarse de que el bucle funcione. Si el bucle no produce ningún sonido, póngase en contacto con su distribuidor.</li> <li>4. Sustituya el auricular.</li> <li>5. Siga el paso 3. Si el sonido se escucha con otro dispositivo, contacte con su distribuidor para cambiar el probador de bucle auditivo.</li> </ol>

Because AUDIOPHONY® takes the utmost care in its products to make sure you only get the best possible quality, our products are subjects to modifications without prior notice. That is why technical specifications and the products physical configuration might differ from the illustrations.

Make sure you get the latest news and updates about the AUDIOPHONY® products on [www.audiophony-pa.com](http://www.audiophony-pa.com)  
AUDIOPHONY® is a trademark of **HITMUSIC S.A.S** - Parc d'activités Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANCE

Debido a que AUDIOPHONY® fabrica sus productos cuidadosamente para asegurarse de que obtenga la mejor calidad posible, nuestros productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Por ese motivo, las especificaciones técnicas y la configuración física de los productos pueden diferir de las ilustraciones.

Asegúrese de recibir las últimas noticias y actualizaciones sobre los productos de AUDIOPHONY® en [www.audiophony-pa.com](http://www.audiophony-pa.com)  
AUDIOPHONY® es una marca registrada de **HITMUSIC S.A.S** - Parc d'activités Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANCIA